

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

## BD ウルトラファインランセット

再使用禁止

### 【警告】

- 感染の危険性があるため、採血前に必ず穿刺部位の消毒をすること。
- 採血後は必ずばんそうこうで止血すること。
- 傷口が治りにくいときは、こまめに消毒すること。

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。一度使用したランセットは必ず廃棄すること。
- 保護キャップが外れている場合は使用しないこと。  
[保護キャップを外さない限り、無菌が保たれている。]

### 【形状・構造及び原理等】

血糖測定等の為に採血用穿刺器具を用いて使用するランセット（採血針）である。

保護キャップにより滅菌が保持されている。


#### <針の寸法>

28G（0.36mm）× 2.92 ～ 3.84mm

30G（0.30mm）× 2.92 ～ 3.84mm

#### <針材質>

ステンレス鋼

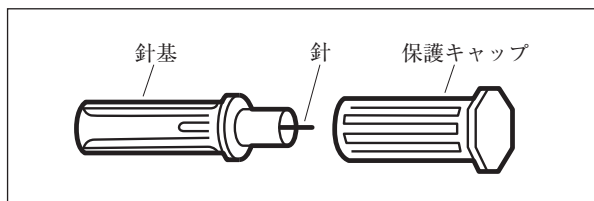

### 【使用目的、効能又は効果】

本品は、採血用穿刺器具に取り付けて、手指等を穿刺するためのランセットで、滅菌済みで、そのまま直ちに使用できる。

### 【操作方法又は使用方法等】

本品は、採血用穿刺器具に確実に取り付け、保護キャップを回しながら外す。1 回限りの使用で使い捨て、再使用はしないこと。  
採血用穿刺器具の添付文書及び取扱説明書を併せて参照すること。

### 【使用上の注意】

#### <使用注意>

- 医療行為以外には使用しないこと。
- 保護キャップが外れにくい場合は、無理に使用しないこと。

- 保護キャップが取れていたり、破損している場合は使用しないこと。
- 本体が破損していたり、針が曲がっている場合は使用しないこと。
- 保護キャップはねじりながら取り外すこと。その際、針にキャップが触れないよう注意すること。
- 使用前に穿刺部位の消毒を行うこと。
- 穿刺のたびに新しいランセットを使用すること。複数の患者に使用しないこと。
- 使用時は、針刺し事故に充分気を付けること。
- 使用済のランセットは安全に廃棄すること。

### <重要な基本的注意事項>

- 本品は必ず医師の指示に従って使用すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### <貯蔵・保管方法>

水濡れに注意し、温度の高い場所には保管しないこと。特に直射日光は避けること。

子供の手の届かない場所に保管すること。

#### <使用期限>

使用期限は外箱に記載。

### 【包装】

1 箱 100 本入（25 本入× 4 パック）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社  
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地  
TEL：0120-8555-90 (BDお客様情報センター)

外国製造業者：

ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー  
(Becton, Dickinson and Company)  
国名：アイルランド

